




 YUNMAI

Masażer Yunmai Mini YMFG-M352

Instrukcja obsługi

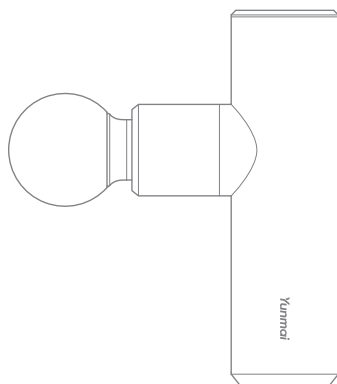

 YUNMAI

Dziękujemy za zakup tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania. Należy upewnić się, że niniejsza instrukcja jest odpowiednio przechowywana.

Ważne informacje

- Nie należy demontować produktu.
- Palce, włosy lub inne części ciała mogą zostać zatrzaśnięte w trzonie i tylnej stronie głowicy masującej. Nie należy dopuszczać do bliskiego kontaktu z tymi obszarami.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 8 roku życia. Dzieciom nie wolno używać, czyścić i konserwować produktu bez nadzoru.

Oświadczenie

Następujące osoby powinny skonsultować się z lekarzem, przed użyciem produktu:

- * Kobiety w ciąży
- * Osoby noszące rozrusznik serca
- * Osoby, które niedawno przeszły operację
- * Osoby posiadające nieprawidłowości w obrębie kręgosłupa, stawów lub kości
- * Osoby, które cierpią na powikłania spowodowane przez inne choroby (takie jak neuropatia lub uszkodzenie siatkówki).

Aktualne badania naukowe koncentrują się na wpływie treningu wibracyjnego na specjalne schorzenia i mogą ograniczyć zakres wyżej wymienionych przeciwwskazań. Doświadczenie praktyczne wykazało, że połączenie terapii i treningu wibracyjnego w wielu okolicznościach służy również jako rodzaj terapii.

Takie postępowanie powinno być jednak zalecane przez lekarzy, specjalistów lub terapeutów i prowadzone w ich obecności.

Środki ostrożności

- Po zakończeniu ładowania należy odłączyć ładowarkę od zasilania.
- Nie należy używać produktu, gdy jest on naładowany.
- Używaj produktu zgodnie z instrukcją.
- Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić, czy produkt może być normalnie użytkowany zgodnie z metodami działania opisanymi w instrukcji.




Nie należy dotykać tej części, aby uniknąć uszczypnięcia, gdy urządzenie jest włączone bez zainstalowanej głowicy masującej.



Nie należy dotykać tej części, aby uniknąć uszczypnięcia, gdy urządzenie jest włączone z zainstalowaną głowicą masującą.

Opis produktu

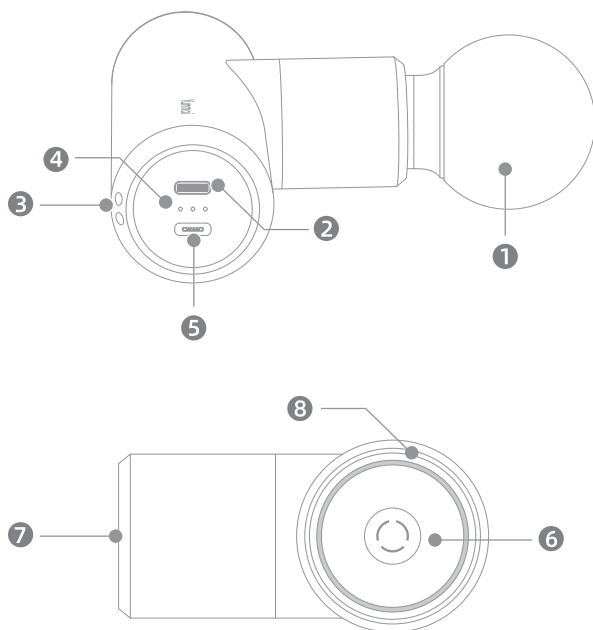


1. Głowica masująca
2. Port ładowania
3. Otwór na linkę ręczną
4. Wskaźnik zasilania
5. Przycisk zasilania
6. Przycisk zmiany trybu pracy
7. Głowica masażera
8. Wskaźnik siły masażera


Zastosowanie masażera

- * Łagodzenie opóźnionej bolesności mięśni po wysiłku fizycznym i rozluźnianie napiętych mięśni
- * Łagodzenie bólu i sztywności mięśni talii, pleców i ramion spowodowanych siedzącym trybem życia i złą postawą
- * Codzienny masaż w celu zrelaksowania ciała

Akcesoria

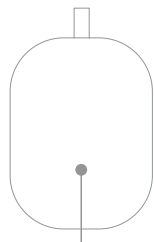


Pudełko do przechowywania

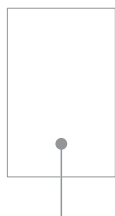

Instrukcja obsługi



Kabel do ładowania

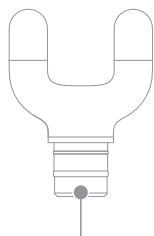

Główka w kształcie litery U



Płaska główka



Okrągła główka

- * Głowica w kształcie litery U: odpowiednia do masażu mięśni po obu stronach kręgosłupa i ramion.
- * Płaska głowica: odpowiednia do rozluźniania większości mięśni całego ciała.
- * Okrągła głowica: Dla dużych grup mięśniowych.

Wskazówki:


Ilustracje produktów, akcesoriów i interfejsu użytkownika są jedynie schematami poglądowymi. Ze względu na aktualizację i unowocześnienia produktu, rzeczywisty produkt może się nieznacznie różnić się od przedstawionego na schemacie. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Metoda stosowania

1. Montaż i demontaż

Montaż:

Na podstawie zapotrzebowania, wybierz głowicę masującą, którą należy włożyć do okrągłego otworu z przodu masażera, aż do momentu, gdy nie da się jej wsunąć, czyli kiedy jest w stanie naprężenia.

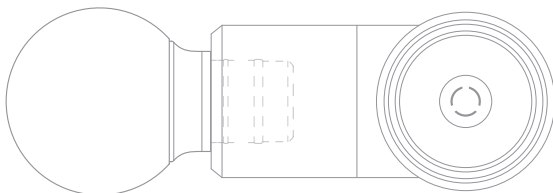


2. Demontaż

Podczas wyjmowania należy przytrzymać głowicę masującą i obrócić ją.

Ostrzeżenie

Głowicę masującą należy zakładać i zdejmować przy wyłączonym zasilaniu. Upewnij się, że głowica masująca jest dobrze zamontowana przed uruchomieniem masażera. Nie należy regulować, instalować ani zdejmować głowicy masującej podczas użytkowania, aby uniknąć uszczyplień.

Obsługa

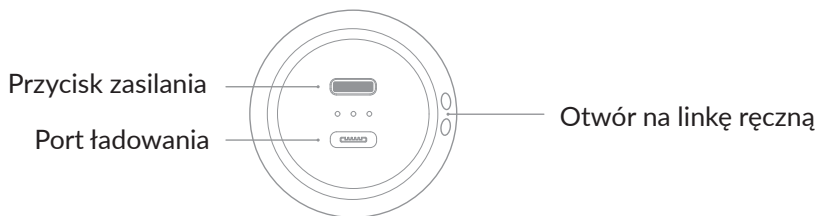


Ładowanie

Port ładowania znajduje się w dolnej części uchwytu masażera. Włóż przewód ładowania do portu ładowania i podłącz zasilacz, aby rozpocząć ładowanie.

(Ostrzeżenie: nie używaj produktu podczas ładowania.)


Przycisk zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zasilania znajdujący się w dolnej części, aby uruchomić masażer. Następnie zaświecą się wskaźniki zasilania (łącznie trzy) o różnych numerach, w zależności od napięcia akumulatora. Aby natychmiast wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk zasilania.

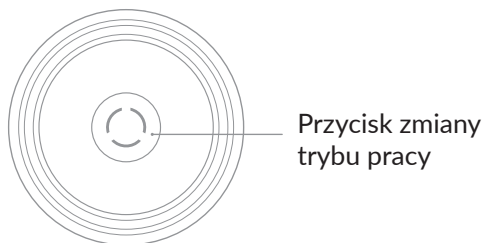


Przycisk zmiany trybu pracy


Po uruchomieniu naciśnij przycisk zmiany trybu pracy, aby zmienić tryb. Masażer można przełączyć na pierwszy, drugi, trzeci lub czwarty tryb poprzez ciągłe naciśnięcie.

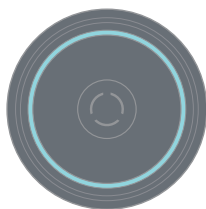


Jasny niebieski

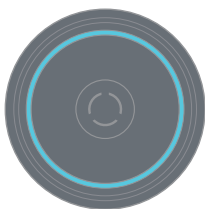


Niebieski

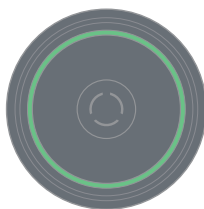

Zielony

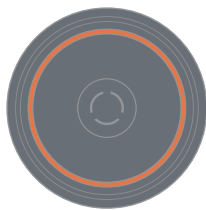

Pomarańczowy

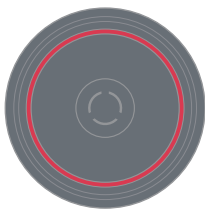

Czerwony

Pierścieniowy wskaźnik siły masażera

Jasnoniebieski: mniejsza siła (pobudzenie mięśni)

Niebieski: uspokaja i rozluźnia

Zielony: komfortowa siła (rozluźnienie powięzi)

Pomarańczowy: głęboki masaż

Czerwony: intensywny masaż

Wskaźnik zasilania

Stan użytkowania

* Wskaźnik niskiego poboru mocy: Po uruchomieniu, pierwszy wskaźnik w pobliżu głowicy masażera na dole (zwany dalej "pierwszym wskaźnikiem") miga w sposób ciągły.

* Wskaźnik pozostałej mocy: Po uruchomieniu, odpowiednie wskaźniki w kolejności od lewej do prawej od pierwszego wskaźnika świecą ciągłym białym światłem.

Stan ładowania

* Podczas ładowania pierwszy wskaźnik miga na biało, co oznacza, że moc jest mniejsza niż 35%.

* Podczas ładowania pierwszy wskaźnik zawsze świeci na biało, a drugi wskaźnik miga na biało, co oznacza, że moc jest większa niż 35%, ale mniejsza niż 70%.

* Podczas ładowania pierwszy i drugi wskaźnik zawsze świecą na biało, a trzeci wskaźnik miga na biało, co oznacza, że moc jest większa niż 70%.

* Podczas ładowania wszystkie trzy wskaźniki są stale włączone, co oznacza, że masażer jest całkowicie naładowany.

Zalecenia

* Wybierz odpowiednią głowicę masującą, włącz masażer i przetłącz na odpowiedni tryb, kierując się własnymi doświadczeniami. Zaleca się rozpoczęcie od niskiego biegu.

* Delikatnie naciśnij głowicę masującą na mięśnie, które mają zostać rozluźnione, a następnie powoli przesuwaj ją w przód i w tył. W przypadku szczególnie bolesnego uczucia, należy przyłożyć siłę w miejscu wrażliwym i przytrzymać przez 15-30 sekund.

* Masażer może wytwarzać siłę uderzenia. Nie zaleca się stosowania nadmiernej siły, aby nie uszkodzić mięśni i kości.

* Zaleca się stosowanie masażera na częściach o pełnych mięśniach. Nie należy stosować masażu w jednej części przez ponad 60 sekund.

* Masażer przejdzie w tryb inteligentnego wyłączenia zasilania po 10 minutach ciągłego używania. W takim przypadku należy ponownie włączyć masażer, jeśli konieczne jest jego użycie. Zaleca się jednorazowe użycie masażera przez 10 minut. Jeśli nadal czujesz się obolały, możesz odpowiednio wydłużyć czas masażu.

* Zaleca się, aby czas jednorazowego użycia nie przekraczał 15 minut, a czas ciągłego użytkowania nie powinien przekraczać 30 minut.

* Należy używać produktu zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.

Parametry podstawowe

Nazwa: Masażer Yunmai Mini

Model: YMFG-M352

Wejście: 5V/9V=2A

Typ portu: Typ-C

Pojemność akumulatora: 2600mAh

Tryb zasilania: Akumulator litowy

Waga: 430 g

Wymiary: 144 x 41 x 80 mm

Najczęściej zadawane pytania

Błąd przy uruchamianiu

1. Wysoka temperatura: w przypadku użytkowania w środowisku o temperaturze powyżej 40°C, masażer może uruchomić zabezpieczenie przed przegrzaniem, powodując normalną awarię rozruchu masażera.

Rozwiązanie: Umieść masażer w środowisku o temperaturze poniżej 40°C na 2 godz. przed uruchomieniem go.

2. Pojemność akumulatora wynosi "0": gdy akumulator jest wyczerpany i jeśli użytkownik nie ładuje go przez dłuższy czas, akumulator uruchomi zabezpieczenie przed niskim poziomem naładowania, określane zbiorczo jako zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem. Masażer nie może normalnie pracować, jeśli zostanie uruchomiony w tym czasie.

Rozwiązanie: Wyłącz masażer, a następnie podłącz ładowarkę (zasilacz), a masażer automatycznie przejdzie w stan ładowania. Po całkowitym naładowaniu odłącz ładowarkę, a masażer będzie mógł normalnie pracować.

Awaria ładowania

1. Masażer przegrzewa się: Gdy temperatura korpusu masażera jest zbyt wysoka, nie można go naładować po podłączeniu do ładowarki.

Rozwiązanie: Przed ładowaniem umieść masażer w środowisku o temperaturze poniżej 40°C na 2 godziny.

Rozsądne użytkowanie produktu może skutecznie wydłużyć jego żywotność.

Sugestie

- * Nie należy rzucać produktem podczas użytkowania.
- * Maksymalny czas nieprzerwanej pracy urządzenia powinien być krótszy niż 30 minut.
- * Należy ładować produkt co drugi miesiąc, jeśli nie jest on używany przez dłuższy czas.

Oświadczenie FCC

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i uznane za zgodne z wymaganiami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednej lub kilku z następujących czynności:

- zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej,
- zwiększenie odległości między urządzeniem, a odbiornikiem,
- podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik,
- konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Uwaga

- Produkt nadaje się wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń!
- Podczas ładowania akumulator musi być umieszczony w dobrze wentylowanym obszarze.
- Akumulator należy utylizować w sposób bezpieczny.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej, umysłowej lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacji nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.