

Aparat do masażu stóp

Instrukcja obsługi

PL



SENCOR®

SFM 3868

WSTĘP:

Regularne stosowanie aparatu do masażu stóp pomoże w lepszym ukrwieniu skóry i polepszeniu krążenia krwi w stopach.

Punkty stymulacyjne działają podobnie jak delikatne dotknięcia palcami Państwa stóp, udzielą Państwu skutecznego i pobudzającego masażu. Natężenie siły masażu można z łatwością regulować dociskając stopy do punktów symulacyjnych lub ich odciążeniem. 70 otworów powietrznych udzieli Państwa stopom relaksacyjnej kąpeli bąbelkowej.

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać poniższe instrukcje:

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) upośledzone fizycznie, czuciowo lub umysłowo, albo niedysponujące odpowiednią wiedzą, chyba że korzystają one z urządzenia pod nadzorem lub zostały odpowiednio poinstruowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.

- Dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem; nie wolno pozwalać im na zabawę urządzeniem.
- Eksploatacja urządzeń elektrycznych wymaga dotrzymywania podstawowych zasad bezpieczeństwa.
- W celu podwyższenia stopnia ochrony polecamy, zainstalować do obwodu elektrycznego łazienki wyłącznik bezpieczeństwa (RCD), o znamionowym natężeniu wyzwalającym 30 mA. Prosimy zwrócić się o radę do elektryka.
- Nie podłączać lub nie odłączać przewodu zasilania z gniazdka prądu elektrycznego jeżeli stopy pozostają zanurzone w wodzie a urządzenie jest włączone.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodu zasilania z gniazdka elektrycznego, należy przekonać się czy przełącznik jest w pozycji „0”.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego. Przy czyszczeniu nie zanurzać urządzenia do wody lub innej cieczy.
- Stać na urządzeniu i pokładanie na urządzenie jakichkolwiek przedmiotów jest zabronione. Urządzenie stosować wyłącznie siedząc.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane nie pozostawiać go w stanie włączonym.
- Nie używać urządzenia jeżeli przewód zasilania lub wtyczka jest uszkodzona. Zakaz ten również obowiązuje w przypadku, kiedy urządzenie nie funkcjonuje poprawnie, jeżeli spadło lub było uszkodzone w inny sposób. Urządzenie należy zanieść do najbliższego autoryzowanego punktu napraw w celu dokonania przeglądu urządzenia.
- Nie wyciągać wtyczki z gniazdka elektrycznego pociągnięciem za przewód zasilania. Przewód zasilania wyciągać z gniazdka wyłącznie za wtyczkę.
- Podwyższycy uwagę jeżeli urządzenie jest stosowane w pobliżu dzieci lub osób niepełnosprawnych.
- Nie polecamy stosowania urządzenia jeżeli osoba używająca urządzenie czuje się ospała.
- Urządzenie stosować wyłącznie na suchej i równej powierzchni. Nie stosować urządzenia poza wnętrzami.
- Zaprzestać używania urządzenia jeżeli użytkownik czuje się nieprzyjemnie, odczuwa bóleści lub skóra jest podrażniona. Nie używać urządzenia jeżeli stopy są napuchnięte, są w stanie zapalnym lub mają wysypkę. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.
- Urządzenie posiada element grzejny, który ogrzewa jego powierzchnię. Osoby o osłabionej czułości na wysoką temperaturę lub nieczułe na wysoką temperaturę powinny używać urządzenia ze zwiększoną ostrożnością.
- Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, musi być wymieniony przez autoryzowany punkt serwisowy lub inną wykwalifikowaną osobę w celu ograniczenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym.

Urządzenie to może być podłączone wyłącznie do gniazdka elektrycznego z prądem zmiennym (230V). Przed zastosowaniem urządzenia należy skontrolować czy dane na tabliczce znamionowej urządzenia są zgodne z parametrami sieci elektrycznej.

Konserwacja:

Urządzenie przeznaczone jest do zastosowania w gospodarstwie domowym. Zabrania się otwierania urządzenia lub naprawiania we własnym zakresie. W przypadku usterki urządzenia należy zwrócić się do autoryzowanego punktu napraw.. Urządzenie to służy do polepszenia Państwa zdrowia, w żadnym przypadku nie do umywania nóg. Przed użyciem urządzenia należy umyć stopy a aparat napełnić czystą wodą. **UWAGA! Zanieczyszczenia mogą spowodować uniedroźnienie otworów i obniżyć skuteczność efektu bąbelkowego.**

Użycie aparatu do masażu stóp

- Polecany czas masażu wynosi 15 min. Długość czasu masażu należy dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika. W żadnym przypadku czas masażu nie może przekroczyć 30 min.
- Urządzenie należy postawić na równą i suchą powierzchnię. Gumowe nożki przeciwpoślizgowe służą do stabilizacji urządzenia. Skontrolować czy urządzenie jest wyłączone – przełącznik obrotowy jest w pozycji 0. Urządzenie napełnić wodą. Poziom wody nie może przekraczać poziomu MAX. Następnie pośrednictwem wtyczki podłączyć urządzenie do gniazdka prądu zmiennego. Nie stać na aparacie.
- Urządzenie może być wypelnione i używane wyłącznie z czystą wodą. Wyłącznie niektóre wybrane tryby umożliwiają użycia urządzenia bez wody.

Aparat do masażu stóp

SFM 3868

PL

NIE ODŁĄCZAĆ LUB NIE PODŁĄCZAĆ PRZEWODU ZASILANIA DO GNIAZDKA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO JEŻELI STOPY ZNAJDUJĄ SIĘ W WODZIE.

Wygodnie usiąść na krześle lub fotelu, włożyć stopy do aparatu i dokonać wybranych ustawień urządzenia.

Przy pomocy wyłącznika obrotowego można wybrać następujące ustawienia:

M - MASAŻ W ZIMNEJ WODZIE LUB MASAŻ BEZ WODY

Jeżeli masaż ma być wykonana w zimnej wodzie, należy wyćmknik obrotowy nastawić tak, aby strzałka ↑ była skierowana w dół na znak „M”. W tym trybie jest również możliwy masaż wibracyjny bez wody.

A+W+M - CIEPŁA KĄPIEL I MASAŻ

Urządzenie napełnić ciepłą wodą. Ustawienie to należy wybrać jeżeli masaż ma być wykonany w ciepłej kąpeli bąbelkowej. Grzałka zabudowana wewnątrz urządzenia zabrania spadku temperatury wody.

W+A CIEPŁA KĄPIEL

Tryb ten umożliwia ciepłą kąpiel z bąbelkami. Tryb ten jest idealny do stopniowego uspokojenia po poprzedzającym masażu stóp przy pomocy innych instrumentów.

0 - WYŁĄCZONO

Wyłączenie aparatu do masażu.

Nasady wymienne troszczą się o Państwa stopy.

- Nasada nr 1 przeznaczona jest do stymulacji obszarów refleksologicznych na stopach oraz służy do polepszenia obiegu krwi stóp
- Nasada nr 2 służy do delikatnego masażu stóp i polepszenia obiegu krwi stóp
- Nasada nr 3 służy do usuwania obumarłych komórek naskórka i skóry

Nasady można używać pod warunkiem podłączenia przewodu zasilania do gniazdka elektrycznego, mogą być również zastosowane w kombinacji z powyżej podanymi funkcjami urządzenia. Wybierz jedną z nasad i załóż ją na wałek umieszczony pośrodku urządzenia. Aby nasada rotowała należy na nią nacisnąć. Silniczek wałeczka wyposażony jest w bezpiecznik przeciwko przegrzaniu i przeciążeniu. Silnik zatrzyma się jeżeli przegrzeje się lub będzie przeciążony. Po odczekaniu i obniżeniu temperatury silnika można go ponownie uruchomić.

Stopy można postawić na wyjmowane wałeczki do masażu w dowolnym czasie pracy urządzenia.

W celu zakończenia masażu należy przełączyć wyłącznik do pozycji „0”. Wyjąć stopy z aparatu i wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka elektrycznego.

NIE OBCIĄŻAĆ URZĄDZENIA WŁASNĄ WAGĄ.

W celu usunięcia wody należy nachylić urządzenie nad umywalkę / zlew i przez dzióbek wylać wodę z urządzenia. Urządzenie opłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Nie zanurzać całego urządzenia do wody lub innej cieczy.

Czyszczenie urządzenia

Po użyciu urządzenia należy przepłukać go czystą wodą. Nie zanurzać całego urządzenia. W przypadku potrzeby, powierzchnię urządzenia wytrzeć suchą ściereczką nawilżoną w roztworze wody i neutralnego środka do utrzymania czystości, następnie urządzenie pozostawić do wyschnięcia. Do czyszczenia wagi nigdy nie stosować benzyny, rozcieńczaczy, środków czystości o właściwościach ściernych lub podobnych odczynników.


Przechowywanie urządzenia

Skontrolować czy przewód zasilania jest odłączony od sieci elektrycznej, jest zimny i czy nie ma w nim wody. Przechowywać w czystym i suchym miejscu. Przed schowaniem urządzenia należy okręcić przewód zasilania wokół nóżek urządzenia. Nie wieszak urządzenia za przewód zasilania.

Aparat do masażu stóp

SFM 3868

Opis urządzenia

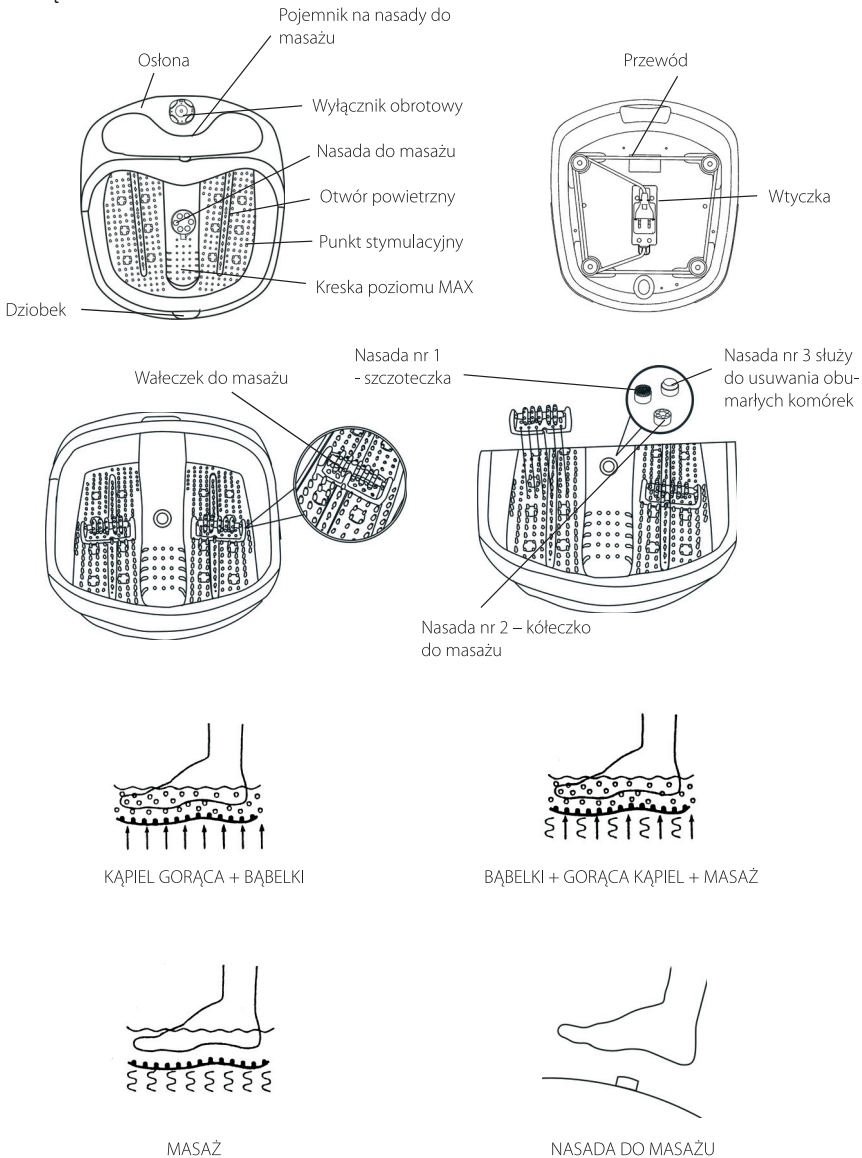

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzieli Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

