


KiCA


Masażer wibracyjny

Instrukcja PL V2.1

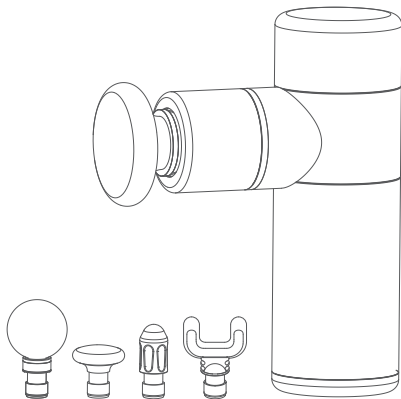


Budowa urządzenia

Korpus

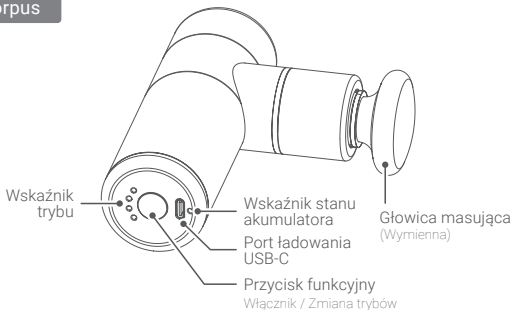

Głowice masujące

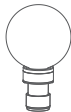

Głowica kulista

Rozluźni tkanki miękkie i wrażliwe mięśnie



Głowica płaska

Doskonale wymasuje mniejsze grupy mięśniowe takie jak mięśnie grzbietu oraz łopatk



Głowica stożkowa

Końcówka sięgnie tkanek głębiej położonych, stawów oraz punktów spustowych, nadaje się również do masażu dużych grup mięśniowych




Głowica w kształcie litery U

Nakładka zaprojektowana z myślą o masażu okolicy ścięgna Achillesa, karku oraz prostowników grzbietu


Użytkowanie

Instalacja/wymiana głowicy

Zamontuj wybraną do Twoich potrzeb głowicę w otworze umieszczonym na froncie urządzenia.

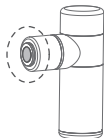

Przykład montażu:

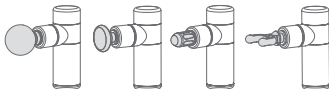

Włączanie/wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.


※ Po uruchomieniu urządzenia nie zmieniaj trybu przez 5 sekund.

! Nie używaj urządzenia podczas ładowania.

Wybór trybu pracy

Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk funkcyjny, aby zmienić tryb pracy masażera.

Zmiana trybów następuje w cyklu: Program 1 - Pobudzenie mięśni / Program 2 - Powierzchnowa relaksacja / Program 3 - Głęboki masaż / Program 4 - Tryb profesjonalny.

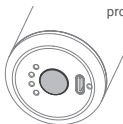

Wskaźniki stanu

Wskaźnik stanu akumulatora


Kolor	Sygnal	Znaczenie
Czerwony	██████████	Ładowanie
Zielony	██████████	Ładowanie zakończone
Zielony	███ ███	Poziom akumulatora ≤10%
Zielony	██ ███	Poziom akumulatora 11% - 30%
Zielony	█ ███	Poziom akumulatora 31% - 60%
Zielony	██████████	Poziom akumulatora 61% - 100%

Wskaźnik trybu

Kolor	Sygnal	Znaczenie
Niebieski	● ○ ○ ○	Program 1
Niebieski	● ● ○ ○	Program 2
Niebieski	● ● ● ○	Program 3
Niebieski	● ● ● ●	Program 4
Niebieski	⓪ ⓪ ⓪	Niski stan akumulatora - wyłączenie urządzenia

Ładowanie

! Nie włączaj urządzenia w trakcie ładowania.

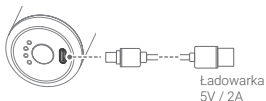

Specyfikacja techniczna

Moc silnika	30W
Średni czas pracy	11 h
Waga	495 g (bez głowicy)
Wymiary	92x137x46mm

Zawartość zestawu



x1



x1



x1



x1



x1



x1



x1



x1

♥ Zastosowania

- (1) Wsparcie przed i po treningowe.
- (2) Zwiększanie efektywności zabiegów rehabilitacyjnych.
- (3) Aktywacja i stymulacja mięśni.
- (4) Działanie przeciwbólowe - łagodzi bóle mięśniowo-powięziowe.
- (5) Polepszenie motoryki stawów.
- (6) Zwiększenie efektywności treningu.
- (7) Przyspieszenie regeneracji mięśni po treningu.
- (8) Zmniejszenie bólu mięśni i rozbięcie skurczów spowodowanych zwichnięciami, nadwyrżeniami lub siniakami.
- (9) Przyspieszenie wchłaniania produktów przemiany materii.
- (10) Relaksacja powięzi.
- (11) Minimalizowanie ryzyka kontuzji.
- (12) Przyspieszenie wchłaniania krwiaków i siniaków.
- (13) Zwiększenie temperatury tkanki mięśniowej.
- (14) Wsparcie w walce z cellulitem.
- (15) Wsparcie w leczeniu hiperalgezji skóry.

! Przeciwwskazania

- (1) Choroby nowotworowe.
- (2) Metalowe zespolenia kości (nie należy używać urządzenia bezpośrednio w obszarze złamania).
- (3) Osteoporoza.
- (4) Zakrzepica.
- (5) Nadciśnienie.
- (6) Cięża (nie należy używać urządzenia w pobliżu brzucha).
- (7) Kamienie nerkowe (nie używaj urządzenia w pobliżu nerek).
- (8) Żylaki.
- (9) Ostre stany zapalne.
- (10) Nie masuj jednego odcinka dłużej niż 4-5 minut.
- (11) Nie masuj obszaru kostnego (rzepki, piszczeli, kości śródstopia itp.).
- (12) Nie masuj bezpośrednio kręgosłupa.
- (13) Nie masuj odcinka szyjnego.
- (14) Nie masuj mięśni twarzy.

Zastrzeżenia prawne

Dziękujemy za zakup masażera wibracyjnego KiCA. Dokument ten zawiera wskazówki dotyczące bezpiecznego i legalnego użytkowania urządzenia. Zapoznaj się uważnie z całym dokumentem, aby zagwarantować prawidłową konfigurację urządzenia. Niestosowanie się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji może doprowadzić do zniszczenia urządzenia lub otaczających go przedmiotów, a nawet do obrażeń ciała.

Rozpoczęcie użytkowania z urządzenia równoznaczne jest z uważnym zapoznaniem się z instrukcją jego użytkowania. Urządzenie może być używane wyłącznie w celach, do których zostało zaprojektowane, zgodnie z obowiązującym prawem oraz zgodnie ze wskazaniami i przeciwwskazaniami medycznymi użytkującego. Producent oraz dystrybutor nie biorą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania oraz wypadków z użyciem urządzenia.

Uszkodzenia urządzenia powstałe z niewyjaśnionych przyczyn nie będą brane pod uwagę podczas procesu reklamacyjnego.

Zasady bezpieczeństwa

1. Urządzenie nie zostało zaprojektowane do bezpośredniego masażu skóry, aby uniknąć podrażnień użyj czystej, suchej odzieży lub suchego, czystego ręcznika na masowanej części ciała. Podczas masażu delikatnie poruszaj urządzeniem.
2. Masaż o dużej intensywności można stosować tylko do tkanek miękkich, jeżeli nie występuje ból lub uczucie dyskomfortu. Nie używaj masażera do masażu głowy lub kości.
3. Długotrwałe masowanie jednego miejsca przez może spowodować wystąpienie siniaków. Masaż należy przerwać niezwłocznie, kiedy poczujemy ból lub dyskomfort.
4. Podczas używania urządzenia zachowaj szczególną ostrożność. Ruchome elementy urządzenia mogą spowodować uszczyknięcia palców lub wciągnięcie włosów.
5. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Nie dokonuj modyfikacji urządzenia na własną rękę.
7. Nie pozostawiaj urządzenia włączonego lub podłączonego do ładowarki bez opieki.
8. Urządzenie może być użytkowane wyłącznie przez osoby dorosłe.
9. Osoby posiadające w/w przeciwwskazania, przed użyciem masażera powinny skonsultować się z lekarzem.

Wskazówki

1. Upewnij się, że ruch głowicy nie jest blokowany podczas uruchamiania przez żadne czynniki zewnętrzne.
2. Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych cieczy, jeżeli nie jest ono wodoodporne.
3. Nie rozbieraj samodzielnie urządzenia, nie licząc elementów wskazanych w instrukcji. Jeżeli uważasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, wyślij je do autoryzowanego serwisu.
4. Ciągła, długotrwała praca może spowodować podwyższenie temperatury silników urządzenia. Zalecamy unikanie takiej sytuacji.
5. Nie narażaj urządzenia na uszkodzenia mechaniczne i upadki. W przypadku nieprawidłowego zachowania urządzenia skontaktuj się z serwisem.

Konserwacja i przechowywanie

1. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich temperatur. Nie zbliżaj urządzenia do piekarnika lub mikrofalówki. Nie pozostawiaj go w samochodzie w słoneczne dni.
3. Przechowuj urządzenie w suchym otoczeniu.
4. Nie przeładuj ani nadmiernie nie rozładuj akumulatora. Może to prowadzić do jego nieprawidłowego działania.
5. Nie używaj urządzenia w ekstremalnie niskich i nadmiernie gorących warunkach.